



SISTEMA DE LENTE DE CONTACTO GP
CON CONTROL DE EXCENTRICIDAD Y
APOYO PEROFÉRICO



Fabricado por:



S P E C T R U M
I N T E R N A T I O N A L

Miopía - Hipermetropía
QC - Córneas Irregulares
Astigmatismo - Intolerancia
DMP - Presbicia


COMPLETE RGP SYSTEM FOR ALL KINDS OF CORNEAS

Bienvenido a la Simplicidad

ElipSYS es un diseño superior basado en la investigación y en 45 años de experiencia fabricando lentes GP. Desde el inicio el sistema ElipSYS ofrece la adaptación más sencilla tanto para córnea regular como irregular.

Cómodo desde el inicio de la adaptación

Su diseño Esfero-Asférico con control de apoyo periférico permite un mejor alineamiento corneal optimizando el intercambio lagrimal, manteniendo su centrado y estabilidad. La mayoría de los pacientes alcanzan un alto grado de confort a los pocos días de uso.

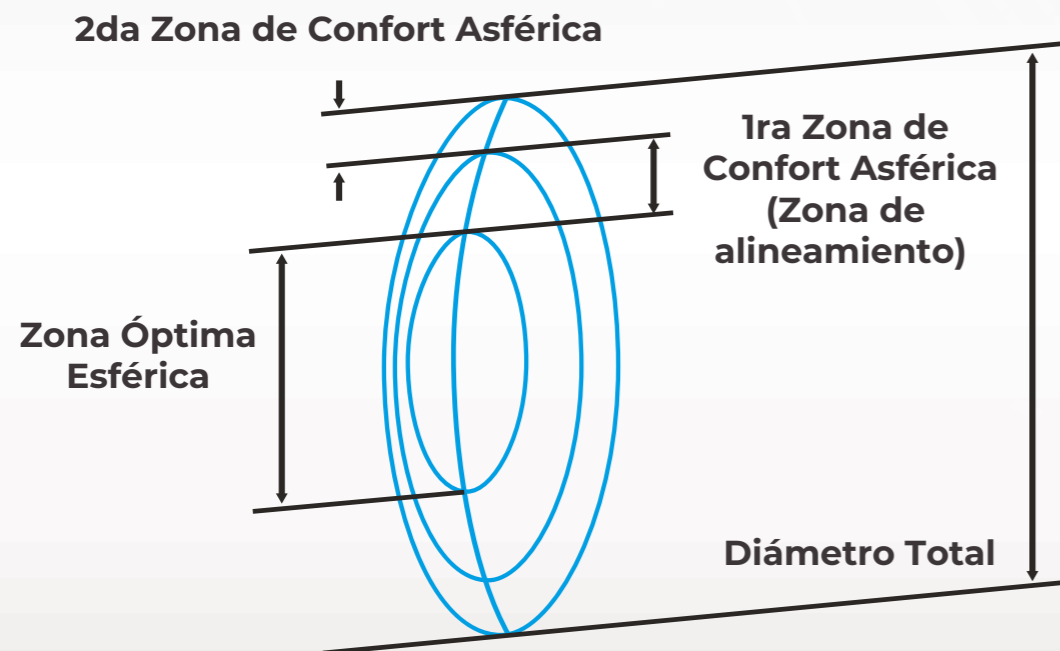


Fácil de adaptar

En el 85% de los casos la lente calculada con el set de pruebas es la lente definitiva. El sistema ElipSYS se complementa con un calculador on-line que permite cálculos empíricos de la lente definitiva o bien contrastar el resultado empírico con las conclusiones obtenidas con el set de pruebas.

La ventaja del control de periferia

El nuevo concepto de “control de apoyo periférico” es ideal para corneas que presentan diferentes niveles de excentricidad. Basado en un análisis estadístico se ha creado un nomograma identificando varios niveles de excentricidad para las diferentes condiciones corneales.

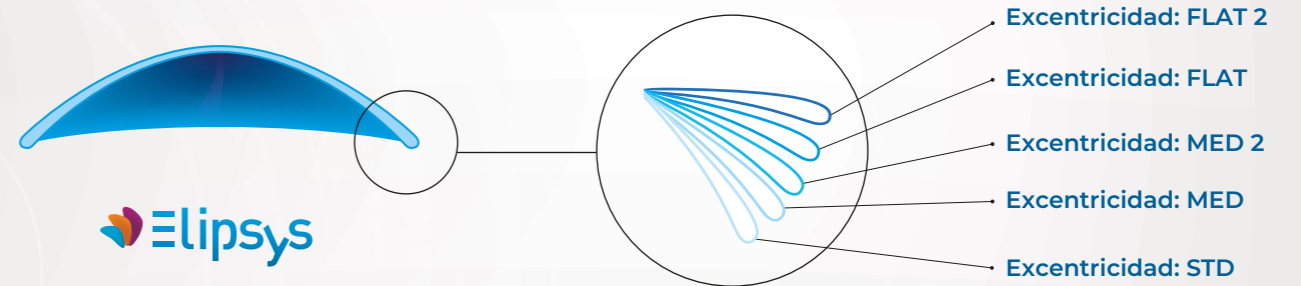

FICHA TÉCNICA

Geometría (interior):	Esférico-Asférico con control de alineamiento periférico
Geometría (exterior):	Esfero-Progresiva

Características:	Valores Disponibles:
Power (D):	± 25D
Excentricidad (Exc):	STD, MED, MED 2, FLAT and FLAT 2
Radio Base (mm):	5.00mm a 11mm (pasos de 0.05mm)
Diámetro Total (mm):	7.00mm a 12.60mm (pasos de 0.10mm)
Diámetro Zona Óptica (ZOmm):	6.00mm a 10.00mm (pasos de 0.10mm)
Espesor Central:	0.17 (-3.00D) estándar
Material:	Optimum Extra - CONTACMAC
Clasificación:	Focon III 4
Permeabilidad al Oxígeno:	DK 100
Tinte de Visibilidad:	Azul
Reemplazo Recomendado:	Entre 18 y 24 meses
Tratamiento de Plasma:	Sí
Grabado de Identificación:	Sí
Presentación:	Vial con precinto de seguridad
Sistema de Mantenimiento:	Conservante + Limpiador Alcohol Isopropílico

Set de Pruebas con 30 Lentes		
ElipSYS STD	Córnea Regular	DT. 9.80mm 10 Lentes
ElipSYS KC	Córnea Irregular	DT. 9.60mm 10 Lentes
ElipSYS SE	Readaptaciones / Descentramientos	DT. 11.20mm 10 Lentes



PREMIUM QUALITY

OPTIMUM
by **Contamac**

Tratamiento de Plasma

S P E C T R U M
INTERNATIONAL

+1 (470) 208-7030

sales@spctinternational.com

